


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	019-08	Edson	16-10-2007

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

10/07 308-05/00 072524 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**



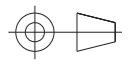

BRITÂNIA



UltraRelax

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	16-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	16-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	16-10-2007	Massageador Ultra Relax	072524	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	308-05/00	0

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Massageador *Ultra Relax Britânia*. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Nota: Antes de ligar o Massageador *Ultra Relax* verificar se a voltagem da tomada elétrica é a mesma do aparelho.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE

- Não utilizar o Massageador *Ultra Relax Britânia* quando apresentar algum dano no cordão elétrico (8), no plugue (9) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Certificar-se de desligar o aparelho da tomada elétrica depois de usá-lo.
- Para manutenção diária, usar um pano levemente umedecido com água. Não usar produtos abrasivos.
- Não colocar o aparelho perto de fontes de calor ou alta temperatura.
- Não colocar o aparelho sob a luz solar direta por muito tempo.
- Não colocar o aparelho ou armazená-lo em lugar úmido.
- Não utilizar este aparelho durante o banho.
- Não usar o produto em partes queimadas
- Usar o aparelho na voltagem recomendada.
- Nunca massagear por mais de 5 minutos a mesma região do corpo. O tempo máximo de funcionamento do aparelho será de 15 minutos para cada aplicação.
- É obrigatório o uso de proteção de tecido (roupa) nos locais da massagem. Evitar tecidos danificados.
- Caso o aparelho entre em contato com líquidos, não tocá-lo antes de desligar da tomada.
- Desligar o aparelho da rede elétrica antes de manusear os acessórios para massagens.
- Não utilizar o aparelho em crianças ou pessoas enfermas sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Nota: A massagem deverá ser agradável e confortável. Se resultar em dor ou desconforto interrompa o uso e consulte um médico.

OPERAÇÃO

- 1-Pressionar o botão Liga/Desliga (7) para colocar o produto em funcionamento.
- 2-Pressionar o botão Ajuste de Velocidades (6) para escolher a intensidade da massagem (nível 1 ao 5) ou selecionar um dos programas de massagem pressionando o botão Ajustes dos Programas (3).
- 3-Iniciar a massagem onde preferir: nos braços, pernas, costas, coxas, ombros.

Para obter uma massagem confortável, pode-se ajustar a velocidade segundo a sua preferência.

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES



- 1.Alça auxiliar
- 2.Rolete massageador
- 3.Botão Ajustes dos Programas (relaxante, energizante e pulsante).
- 4.Programas (relaxante, energizante e pulsante).
- 5.Lâmpadas indicadoras de velocidades (Níveis 1 ao 5)
- 6.Botão Ajuste de Velocidade
- 7.Botão Liga/Desliga
- 8.Cordão Elétrico
- 9.Plugue
- 10.Alça

SELEÇÃO DE VÁRIAS VELOCIDADES

As velocidades ajustáveis permitem maior flexibilidade nas massagens. A velocidade mais alta é apropriada para combater a rigidez dos músculos, ao passo que a mais baixa é aconselhável para dores e tensões.

O produto oferece cinco opções de velocidades de massagem para aliviar a tensão e suavizar músculos cansados e doloridos.

MÁXIMA VERSATILIDADE

O aparelho oferece três programas de massagem: relaxante, energizante e pulsante. São variações pré-programadas de velocidade para ajudar a relaxar e se sentir bem.

MÁXIMO CONTROLE

O massageador é leve e fácil de manusear. A alça auxiliar (1) oferece um maior controle e uma melhor redistribuição do peso, fazendo com que o aparelho fique ainda mais leve.