

Philco

MASSAGEADORES

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MASSAGEADOR BODY PLUS
PMGR01



Philco
MASSAGEADORES

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499



LEIA O MANUAL

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Este produto é usado principalmente para massagem relaxante nos ombros, costas, lombar, braços e pernas.
- Se algo incomum ocorrer com o aparelho ou com a pele durante o uso, interrompa o uso imediatamente.
- Certifique-se de usar o carregador que acompanha o produto ao carregar este produto, e conecte o carregador à uma tomada elétrica longe de fontes de calor ou fogo para evitar incêndio.
- Como este produto possui uma bateria recarregável embutida, não coloque o produto no fogo ou perto dele e evite usá-lo em alta temperatura e ambientes superaquecidos, pois pode causar defeitos ao produto, incêndio.
- A bateria deste produto é uma bateria dedicada. Se você continuar a usá-la depois da vida útil já ultrapassada, uma reação química pode ser gerada dentro da bateria, levando à expansão e deformação. Além disso, o produto pode ser deformado em contato com altas temperaturas ou

- quedas e acidentes domésticos. Se o produto estiver deformado ou danificado, não o use para evitar o risco de choque elétrico e incêndio.
- Não use um carregador quebrado, pois o soquete mal encaixado no produto pode provocar choque elétrico, curto-circuito, incêndio e assim por diante.
- Não use outro carregador para carregar o produto, a fim de evitar danificá-lo ou causar incêndio, choque elétrico, etc.
- Não use este produto para outra finalidade não incluída no escopo deste manual para evitar mau funcionamento, incêndio ou incêndio causado pelo calor.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Coloque o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Pare imediatamente de usar o produto e desconecte a energia em caso de aquecimento anormal.
- Esse produto não deve ser usado por pacientes com tumor maligno, com implantes metálicos no corpo como marca-passo cardíaco, mulheres grávidas não podem usar, as mulheres em período menstrual e pessoas que sofrem de doenças cardíacas.
- Certifique-se de que a aparência do produto não está danificada e a luz indicadora de inicialização e a temperatura estão normais antes de usar

este produto.

- Certifique-se de seguir as instruções do manual do produto ao usá-lo
- Não desmonte ou modifique o produto por conta própria para evitar mau funcionamento.
- Evite deixar cair e bater no produto para evitar falhas.
- O produto deve ser limpo após o uso para evitar o acúmulo de resíduos.
- Não usar o produto se houver ferimentos ou erupções na pele.
- Não manuseie o produto com as mãos molhadas.

SÍMBOLOS




Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

COMPONENTES



PAINEL DIGITAL

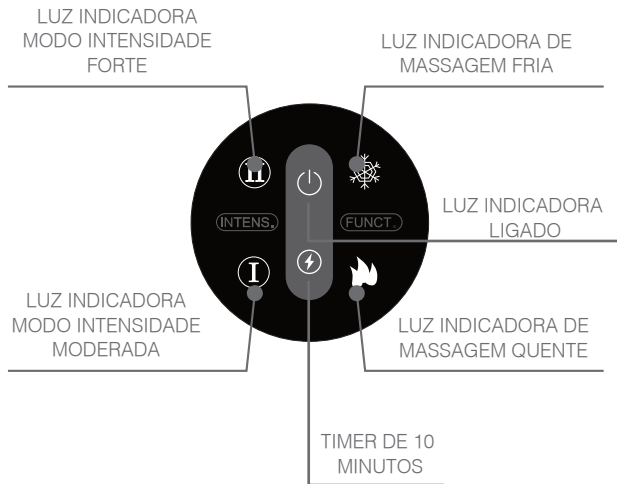

CARREGANDO A BATERIA

- 1- Carregue a bateria por aproximadamente 2 horas antes uso inicial.
- 2- Certifique-se de que todos as chaves estejam na posição desligada.
- 3- Conecte o adaptador ao conector AC da unidade e conecte o outra extremidade para a tomada elétrica.
- 4- A luz de LED no adaptador acenderá em vermelho enquanto estiver carregando. Depois de totalmente carregado, a luz indicadora do LED ficará verde.

Cuidados ao carregar o aparelho!

- Não insira e retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas (pode causar choque elétrico e curto-circuito).
- Não use em locais onde a água é acessível, como em uma banheira ou em um local úmido, para evitar o mau funcionamento ou curto-circuito.
- Não deixar o produto carregando ao sair de casa, o carregamento deve ser supervisionado.
- Desligue e retire o plugue da tomada elétrica imediatamente quando ocorrerem anormalidades durante o carregamento.
- Pare de carregar imediatamente seu aparelho se o cabo do carregador estiver danificado.
- Não dobre, estique, torça, pressione ou enrole o cabo do carregador.
- O produto não funciona enquanto estiver carregando.

INSTRUÇÕES DE USO


- 1- Segure o massageador e toque em seu corpo onde deseja massagear.
- 2- Você pode selecionar apenas o modo de vibração ou as terapias de temperaturas (quente ou fria). Você pode trabalhar ambas as funções ao mesmo tempo.
- 3- Pressionando o seletor Massagem para selecionar intensidade moderada ou forte de vibração, e o seletor de temperatura para selecionar a terapia quente ou fria.



- Na terapia fria a temperatura pode variar entre 7°C à 13°C. Recomenda-se para diminuir o inchaço corporal, alívio anti-inflamatório, contusões musculares e tonificar os músculos. Durante o uso desta função a luz azul ficará ligada.
- Na terapia quente a temperatura pode variar de 40°C a 50°C e a luz vermelha é ativada. Recomenda-se o uso para melhorar a circulação sanguínea, relaxamento dos músculos, absorção de pomadas, loções e cosméticos, aliviando o estresse e dores musculares.
- Vibroterapia e estética: as ondas vibratórias auxiliam no relaxamento dos músculos aliviando as tensões do dia a dia. Com o auxílio de cosméticos

de tratamentos aliados a terapia quente esse modelo promove a circulação da região dos glúteos e coxas, diminuindo a celulite.

ALÍVIO DO ESTRESSE E DORES MUSCULARES, AJUDANDO A RELAXAR, TONIFICAR E FIRMAR.

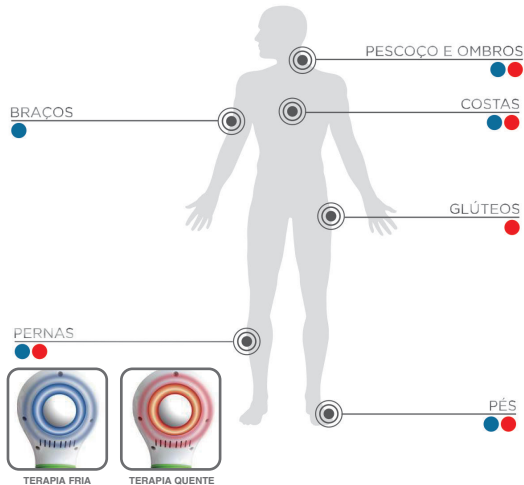

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Não enrolar o cabo do carregador em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes dos aparelhos tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza dos produtos, pode causar danos irreversíveis.
- O aparelho não é à prova d'água mas pode ser usado com cremes e deve ser limpo com pano úmido antes de guardar.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar os aparelhos.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.



ABRASIVOS



CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco
BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ
07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

Philco
www.philco.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PHILCO (47) 3431-0499

10/20 4301-09-05 732124 055603001 Rev.0

