


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	018-08	Edson	16-10-2007

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

10/07 307-05/00 072523 REV.0

**BRITANIA**



**InfraRelax**  
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	16-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	16-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	16-10-2007	Massageador Infra Relax	072523	FOLHA
<b>BRITANIA</b>				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	307-05/00	0

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Massageador *Infra Relax Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.


**Nota: Antes de ligar o Massageador *Infra Relax Britânia* verificar se a voltagem da tomada elétrica é a mesma do aparelho.**

## AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE

- Caso sinta qualquer tipo de dor, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.
- Não utilizar o Massageador *Infra Relax Britânia* quando apresentar algum dano no cordão elétrico (5), no plugue (6) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Certificar-se de desligar o aparelho da tomada elétrica depois de usá-lo.
- Para manutenção diária, usar um pano levemente umedecido com água. Não usar produtos abrasivos.
- Não colocar o aparelho perto de fontes de calor ou alta temperatura.
- Não colocar o aparelho sob a luz solar direta por muito tempo.
- Não colocar o aparelho ou armazená-lo em lugar úmido.
- Não utilizar este aparelho durante o banho.
- Não usar o produto em partes queimadas
- Usar o aparelho na voltagem recomendada.
- Nunca massagear por mais de 5 minutos a mesma região do corpo. O tempo máximo de funcionamento do aparelho será de 15 minutos para cada aplicação.
- É obrigatório o uso de proteção de tecido (roupa) nos locais da massagem. Evitar tecidos danificados.
- Caso o aparelho entre em contato com líquidos, não tocá-lo antes de desligar da tomada.
- Desligar o aparelho da rede elétrica antes de manusear os acessórios para massagens.
- Não utilizar o aparelho em crianças ou pessoas enfermas sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Nota: A massagem deverá ser agradável e confortável. Se resultar em dor ou desconforto interrompa o uso e consulte um médico.**

## CONHECENDO SEU MASSAGEADOR

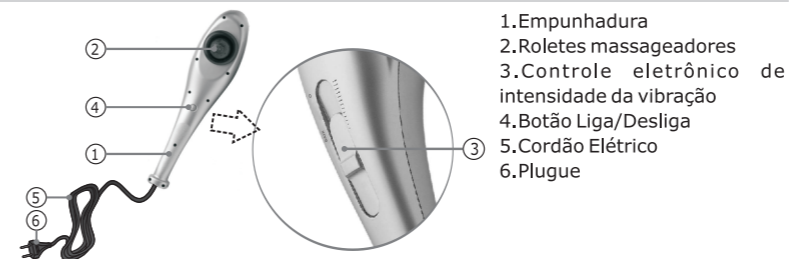

## MODO DE FUNCIONAMENTO (OPERAÇÃO)

- 1- Inserir o plugue (6) na tomada elétrica.
- 2- Pressionar o botão LIGA / DESLIGA (4), o aparelho começará a funcionar.
- 3- Para obter uma massagem confortável, pode-se ajustar a velocidade através do botão de controle eletrônico de intensidade da vibração (3).
- 4- Iniciar a massagem onde preferir: nos braços, pernas, costas, coxas, ombros.

## ALÍVIO E RELAXAMENTO

O Massageador *Infra Relax Britânia* foi desenvolvido para um alívio efetivo de tensões e dores resultantes de exercícios físicos e atividades muito intensas. Quando seus músculos ficam doloridos devido ao cansaço ou se enrijecem, uma boa massagem ajuda a aliviar a sensação de desconforto e a restaurar-lhes a flexibilidade.

Poderá ser usado em todos os grupos de músculos do seu corpo, nas solas dos pés, na cintura ou na região lombar.

## INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO

O controle eletrônico de intensidade permite ter maior flexibilidade nas massagens. A intensidade mais alta é apropriada para a rigidez dos músculos, ao passo que a mais baixa é aconselhável para dores e tensões.

## ROLETES DE MASSAGEM

Pode-se escolher entre três roletes de massagem segundo a preferência ou a necessidade de massagear uma região determinada do corpo, proporcionando-lhe assim uma massagem mais confortável.